

Twisthaler®使用说明

什么是Twisthaler®装置?


这是一种用来盛装多个剂量的某一干粉状药物的装置。当通过吸入器喷嘴吸气时，药物会直接进入肺部。须存放在干燥处，以防药物颗粒受潮结块。使用者必须站立或坐下，保持背部挺直以便胸部自由扩张。应经常使用干布清洁喷嘴。请勿水洗，以防干粉受潮。



如何使用Twisthaler®吸入器?

请您保持站立或坐下，以最放松的方式完成下列操作：

1. 保持吸入器直立，握住底座。按逆时针方向转动盖子以便把它取下。剂量计数器将显示药剂减少一剂。吸入器有药剂量为14、30或60剂的三种规格。

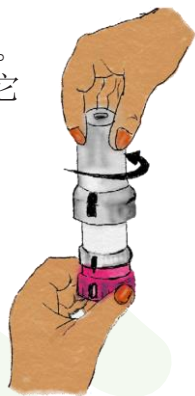

2. 将肺部空气全部排出（请勿吹喷嘴）。


3. 将喷嘴在嘴中放好，用嘴用力猛吸气。



4. 屏气10秒，或您能坚持的最长时间。

5. 慢慢呼气。

6. 盖回盖子时，按顺时针方向旋转保护盖并轻轻按压，直至听到“咔哒”声，以便为下次使用上药。

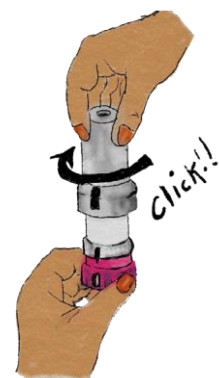

7. 盖子上的箭头必须与计数器显示窗完全对齐。



8. 完成后，使用漱口液漱口。

9. 计数器显示为0时，则无剩余药剂：盖子会被锁定，因而无法上药。

如有任何疑问，请向护士进行咨询。