



INHALADORS DISPONIBLES

Pols seca

UNIDOSI		Aerolizer®
		Breezhaler®
		Handihaler®
		Tavulus®
		Zonda®

MULTIDOSI		Accuhaler®
		Clickhaler®
		Easyhaler®
		Ellipta®
		Forspiro®
		Genuair®
		Nexthaler®
		Novolizer®
		Turbuhaler®
	Twisthaler®	
	Spiromax®	

Flux inspiratori ≥30 l/m

<50 l/m	Handihaler® Ellipta® Easyhaler® Twisthaler®
50-60 l/m	Turbuhaler®
60-90 l/m	Accuhaler® Genuair® Nexthaler® Novolizer® Spiromax®
>90 l/m	Aerolizer® Breezhaler®


Núvol de vapor suau



Pressuritzat clàssic



Pressuritzat partícula fina

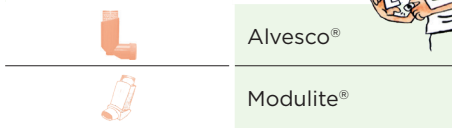

Flux inspiratori 20-30 l/m

Inhaladors cartutx pressuritzat	Alvesco® Cartutx pressuritzat clàssic Modulite®
Inhalador de vapor suau	Respimat®


Tècnica d'inhalació

PASSOS MÉS IMPORTANTS

1. Destapar



2. Agitar/carregar

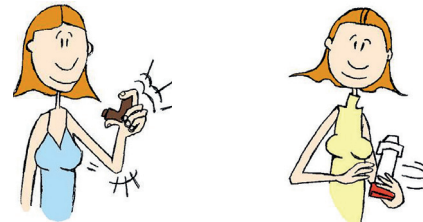

3. Espiració




4. Inspiració

ICP/IVS/cambra Lenta



IPS Enèrgica

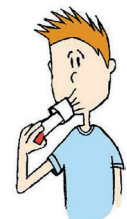

5. Apnea

10 segons



6. Esbandir la boca amb aigua



ICP: Inhalador de cartutx pressuritzat
IPS: Inhalador de pols seca
IVS: Inhalador de vapor suau o boira fina

Setembre 2021

DOCUMENT DE CONSENS EN INHALADORS

Mireia Baiges, Francisco Cegri, Ruth Farriols, Xavier Flor, Yolanda Galea, Carme Grau, Montse Llordés, Mònica Monteagudo, Núria Sánchez i Rosa Villafafila




Boehringer-Ingelheim col·labora en la impressió i difusió de la present publicació. No obstant això, Boehringer-Ingelheim no ha estat implicat en l'elaboració de la publicació.



Consens inhaladors

ELECCIÓ DEL DISPOSITIU SEGONS CAPACITAT INSPIRATÒRIA

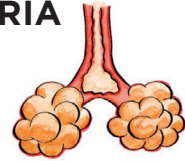

	ALTA Factors del dispositiu passius/actius				BAIXA Factors del dispositiu actius		
	ICP convencional	ICP partícules ultrafines	IPS	IVS	ICP convencional	ICP partícules ultrafines	IVS
Coordinació	+	+		+	+	+	+
Cambrà							
Impacte orofaríngic (velocitat sortida aerosol)							
Dipòsit pulmonar							

- Difícil
- Intermedi
- Fàcil

⊕ Si hi ha problemes de coordinació, cal afegir la cambra.

Dispositius PASSIUS: requereixen esforç inspiratori per generar un flux inspiratori adequat i, per tant, l'activació del dispositiu.

Dispositius ACTIUS: no requereixen esforç inspiratori per a l'activació del dispositiu.

ICP: Inhalador de cartutx pressuritzat
 IPS: Inhalador de pols seca
 IVS: Inhalador de vapor suau o boira fina

ELECCIÓ DEL DISPOSITIU SEGONS EL PERFIL DEL PACIENT

Demana al pacient que respiri còmodament i que aixequi la barbata abans de provar cadascuna de les maniobres d'inhalació següents:

