


Instrucciones de uso del inhalador de cartucho presurizado (ICP) de partículas ultrafinas (Modulite®)

¿Qué es el sistema Modulite®?

Es un tipo de inhalador que contiene medicamento disuelto en forma de solución. Al presionar el cartucho e inhalar a través de la boquilla, el medicamento entra en los pulmones con el aire que se inspira. Es pequeño y ligero y puede acoplarse a cámaras de inhalación. Hay que sincronizar la salida del fármaco con la inspiración.

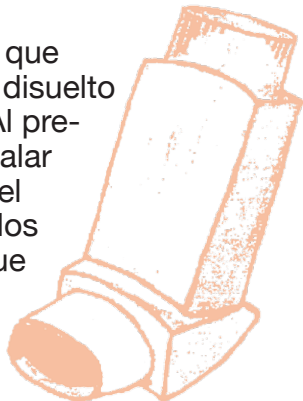

La carcasa es de plástico y se puede limpiar con agua y jabón.

¿Cómo se realiza la inhalación con el cartucho presurizado con la solución Modulite®?

Haga las maniobras siguientes tan relajadamente como le sea posible, de pie o sentado:

1. Quite el tapón. No es necesario agitarlo.



2. Mantenga el inhalador en la posición correcta (en forma de L).



3. Expulse tanto aire de los pulmones como le sea posible.



4. Levante la cabeza y póngase el inhalador en los labios. Empiece a coger aire por la boca.



5. Presione el inhalador y continúe cogiendo aire por la boca, lenta y profundamente.



6. Retenga el aire dentro de los pulmones unos 10 segundos, o hasta que le sea posible.



7. Expulse el aire lentamente.



8. Al terminar, haga gárgaras y enjuáguese.



9. Ponga el tapón.



Cuando utilice el inhalador por primera vez, o si lleva unos días sin utilizarlo, realice entre 2 y 4 pulsaciones al aire para comprobar que el aerosol sale adecuadamente.

Ante cualquier duda, consulte con la enfermera.