


Novolizer®使用说明

什么是Novolizer®装置?


这种装置可盛装某一干粉状药物的多个剂量。当通过吸入器喷嘴吸气时，药物会直接进入肺部。须存放在干燥处，以防药物颗粒因受潮结块。无需摇晃，吸入器应直立使用。使用者必须站立或坐下，保持背部挺直以促进胸部自由扩张。应经常使用干布清洁喷嘴。请勿水洗，以防干粉受潮。

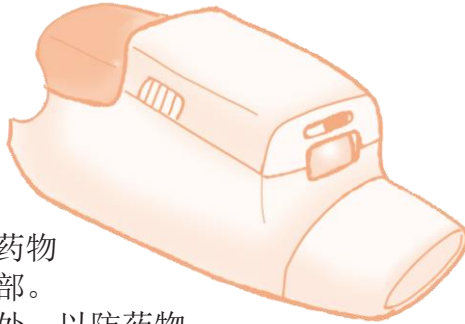

如何使用Novolizer®吸入药物?

请您保持站立或坐下，以最放松的方式完成下列操作（首次使用Novolizer®时，须将放药剂量盒放入装置）：

1. 打开装药的盖子。

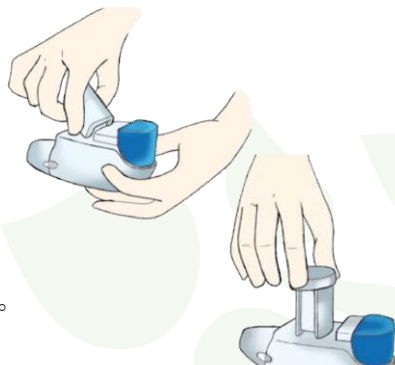

2. 放入放药剂量盒。

3. 打开喷嘴的盖子（显示窗将呈红色）。



4. 按压装置的按钮完成上药（显示窗将变成绿色）。



5. 将肺部空气全部呼出（请勿吹喷嘴）。



6. 将喷嘴在口中含好，用嘴用力猛吸气；您会听到“咔哒”声。显示窗将再次变红。



7. 屏气10秒，或您能坚持的最长时间。



8. 慢慢呼气。



9. 完成后，使用漱口水漱口。



10. 盖上盖子。

吸入器上的计数器会显示药的剩余剂量。每使用10次，计数器会跳转1次。最初含60个剂量。当计数器上出现红线标志时，意味着剩余剂量不足10个。当数字为0时，装置封闭，因而无法继续上药。

如有任何疑问，请向护士进行咨询。