


## 带储雾罐的超细颗粒定量吸入器 (Modulite®) 使用说明

### 什么是Modulite®装置?

这是一种含有液化药物的吸入器。按压储雾罐并从喷嘴吸气时，药物会随吸入的空气进入肺部。吸入器体积小、重量轻，且可以连接吸气囊。喷药必须与吸气保持同步。

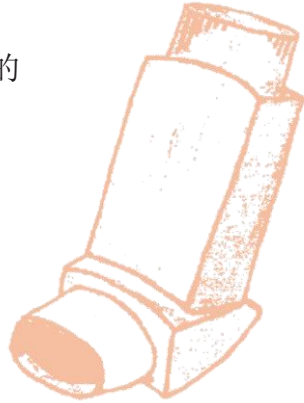

支架为塑料材质，可以用肥皂和水清洗。


### 如何使用储雾罐中含Modulite®液化药物的定量吸入器?

请您保持站立或坐下，以最放松的方式完成下列操作：

1. 打开盖子。无需摇晃。

2. 保持吸入器的正确手持方向（使之呈L形）。

3. 尽力将肺部空气全部呼出。

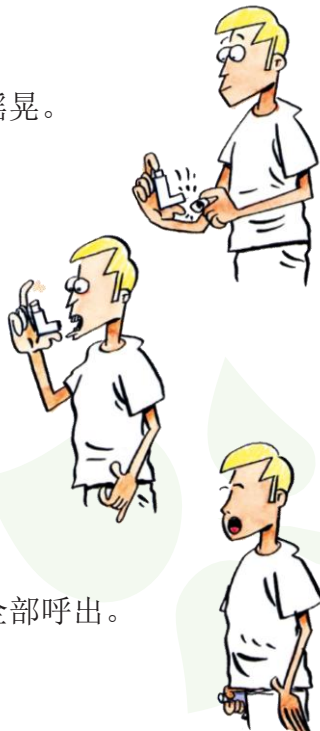

4. 抬起头，把吸入器喷嘴含入口中。开始用嘴吸气。

5. 按压吸入器并继续用嘴缓慢地深吸气。

6. 屏气10秒，或您能坚持的最长时间。

7. 慢慢呼气。

8. 完成后，使用漱口水漱口。

9. 盖上盖子。



如果是第一次使用吸入器或已若干天未使用，请按压2到4次，以确保气雾能够正确喷出。

如有任何疑问，请向护士进行咨询。