


## Instrucciones de uso del K-Haler®

### ¿Qué es el sistema K-Haler®?

Es un dispositivo que tiene forma de cartucho y contiene un medicamento disuelto en suspensión. Cuando se aspira aire a través de la boquilla del inhalador, se inhala el medicamento, y este entra directamente en los pulmones. El dispositivo es pequeño y ligero, y es sencillo de utilizar porque el fármaco sale automáticamente cuando se inspira.

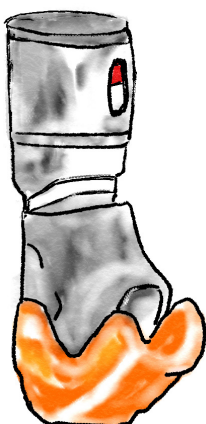

Limpie el cartucho con un pañuelo seco o húmedo, sin desmontarlo ni sumergirlo en el agua. Una ventanilla indica las dosis restantes y desde que solo quedan 28 dosis hasta que no queda ninguna muestra una señal roja.

### Quando lo utilice por primera vez o si hace más de 3 días que no lo utiliza

Debe prepararlo (cebarlo) para garantizar que funciona correctamente y que administrará la dosis correcta.

**1.** Agite antes de abrir la tapa.



**2.** Manteniéndolo siempre en posición vertical, abra la tapa tanto como le sea posible y luego ciérrela completamente.



**3.** Repita cuatro veces los pasos 1 y 2.

### ¿Cómo se inhala con el K-Haler®?


Realice las siguientes maniobras de una manera tan relajada como le sea posible, de pie o sentado.

**1.** Agite el dispositivo, manteniéndolo vertical.

**2.** Abra la tapa completamente.

**3.** Sin soplar dentro de la embocadura expela tanto aire de los pulmones como pueda.

**4.** Ajuste la boquilla en los labios y tome aire por la boca lenta y profundamente.

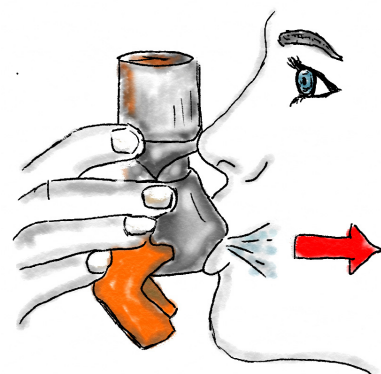


**5.** Retenga el aire dentro de los pulmones unos 10 segundos o hasta que pueda.

**6.** Expulse el aire lentamente.

**7.** Tras cada inhalación mantenga el inhalador en posición vertical y cierre la tapa completamente.

**8.** Haga gárgaras y enjuáguese al acabar.

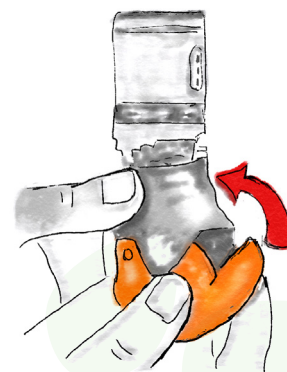

En el embalaje de este dispositivo encontrará información complementaria.

Ante cualquier duda, consulte con enfermería.