


Instrucciones de uso del Aerolizer®

¿Qué es el sistema Aerolizer®?

Es un dispositivo adaptado para la inhalación del fármaco contenido en una cápsula que previamente se coloca dentro y se perfora. Al coger aire a través de la boquilla del inhalador, el medicamento entra directamente en los pulmones. Debe guardarse en sitios secos para evitar que la humedad aglomere las partículas del fármaco. No debe agitarse y debe utilizarse en posición vertical. La persona debe estar de pie o sentada y con la espalda recta para facilitar la libre expansión del tórax. Debe limpiarse la boquilla con un paño seco. No debe lavarse con agua, porque el polvo seco se puede ver afectado por la humedad.

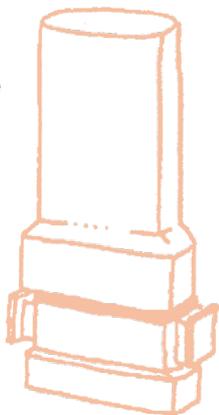


¿Cómo se realiza la inhalación con el Aerolizer®?

Haga las maniobras siguientes tan relajadamente como le sea posible, de pie o sentado:

1. Quite el tapón.



2. Gire la boquilla siguiendo el sentido de las flechas: quedará a la vista el orificio para la cápsula. Ponga la capsula en el orificio y vuelva a girar el tubo hasta la posición inicial.

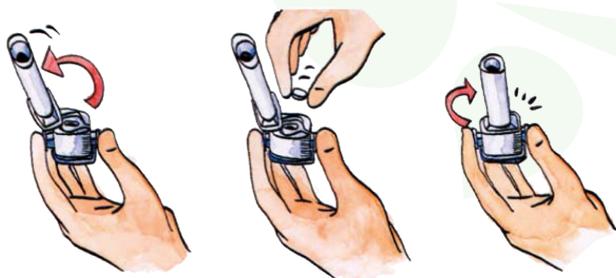

3. Perfore la cápsula presionando los botones laterales del inhalador, una sola vez.



4 y 5. Expulse todo el aire de los pulmones (sin soplar por la boquilla). Ajuste la boquilla en los labios y levante la cabeza.



6 y 7. Coja aire por la boca, rápida y energicamente (sin apretar los botones laterales). Retenga el aire dentro de los pulmones unos 10 segundos, o hasta que le sea posible.

8. Expulse el aire lentamente por la boca.



9. Asegúrese que la cápsula esté vacía. Si no fuera así, repita los pasos del 4 al 8.



10. Ponga el tapón.

11. Al terminar, haga gárgaras y enjuáguese.



Ante cualquier duda, consulte a la enfermera.