


Instruccions d'ús del Genuair®

Què és el sistema Genuair®?

És un dispositiu que conté múltiples dosis d'un fàrmac en forma de pólvores seques. En agafar aire a través de l'embocadura de l'inhalador, el medicament entra directament als pulmons. S'ha de guardar en llocs secs per evitar que la humitat aglomeri les partícules del fàrmac. La persona ha d'estar dreta o asseguda i amb l'esquena recta per facilitar la lliure expansió del tòrax.

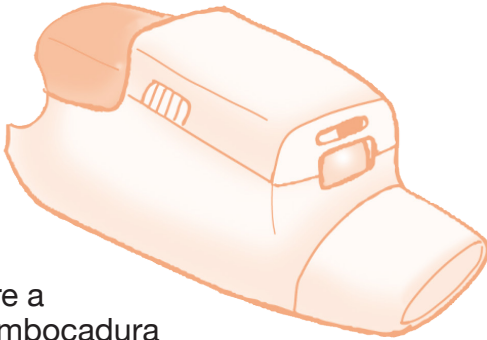


S'ha de netejar regularment l'embocadura amb un drap sec. No s'ha de rentar amb aigua, perquè les pólvores seques es poden veure afectades per la humitat.

Com es duu a terme la inhalació amb el Genuair®?

Feu les maniobres següents tan relaxadament com pugueu, drets o asseguts:

1. Traieu el tap de l'embocadura (la finestra serà vermella).

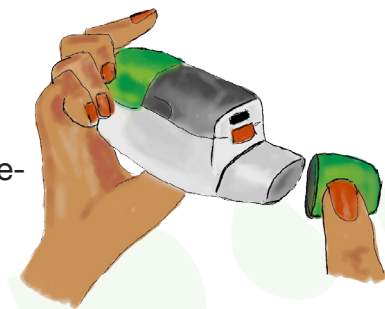

2. Premeu el botó del dispositiu per carregar la dosi (la finestra es torna de color verd).



3. Traieu tot l'aire dels pulmons, sense bufar per l'embocadura.

4. Ajusteu els llavis a l'embocadura i agafeu aire per la boca ràpidament i enèrgicament; se sentirà un clic. La finestra es torna vermella.

5. Reteniu l'aire dins els pulmons uns 10 segons, o fins que pugueu.

6. Expulseu l'aire lentament.

7. Feu gàrgares i glopegeu en acabar.

8. Poseu-hi el tap.

L'inhalador té un comptador que indica les dosis restants. El comptador gira cada 10 activacions. Inicialment, porta 60 dosis. Quan apareix el senyal amb ratlles vermelles al comptador, vol dir que queden menys de 10 dosis. En arribar al 0, es bloqueja i no permet carregar més dosis.

Per a qualsevol dubte, consulteu la infermera.