

Instrucciones de uso del Genuair®

¿Qué es el sistema Genuair®?

Es un dispositivo que contiene múltiples dosis de un fármaco en forma de polvo seco. Al coger aire a través de la boquilla del inhalador, el medicamento entra directamente en los pulmones. Se debe guardar en un sitio seco para evitar que la humedad aglomere las partículas del fármaco. La persona debe estar de pie o sentada y con la espalda recta para facilitar la libre expansión del tórax.




Debe limpiarse regularmente la boquilla con un paño seco. No se debe lavar con agua, porque el polvo seco se puede ver afectado por la humedad.

¿Cómo se realiza la inhalación con el Genuair®?

Haga las maniobras siguientes tan relajadamente como le sea posible, de pie o sentado:

1. Quite el tapón de la boquilla (la ventana estará roja).

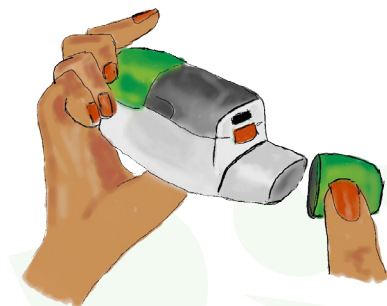

2. Presione el botón del dispositivo para cargar la dosis (la ventana se volverá de color verde).



3. Expulse todo el aire de los pulmones sin soplar por la boquilla.

4. Ajuste los labios en la boquilla y coja aire por la boca rápida y enérgicamente; oirá un clic. La ventana se vuelve de color rojo.

5. Retenga el aire de los pulmones unos 10 segundos, o hasta que le sea posible.

6. Expulse el aire lentamente.

7. Al terminar, haga gárgaras y enjuáguese.

8. Coloque el tapón.

El inhalador tiene un contador que indica las dosis que quedan. El contador gira cada 10 activaciones. Inicialmente, dispone de 60 dosis. Cuando aparece una señal con rayas rojas en el contador, significa que quedan menos de 10 dosis. Al llegar a 0, se bloquea el dispositivo y no permite cargar más dosis.

Ante cualquier duda, consulte con la enfermera.